

140*150mm/157双铜/正反面印刷/单色印刷/不过膜

智能坐灸仪使用说明书

型号：AJ280-A01



为保证您能充分了解并正确安装使用本产品，请您仔细阅读说明书；建议您妥善保存，以便需要时查阅。

安全使用说明

⚠️ 温馨提示：

- ◆ 此产品仅供室内使用；
- ◆ 本品可以穿衣服使用，无需直接接触人体皮肤。湿蒸时有少量水汽，不建议穿厚重衣物使用此模式；
- ◆ 产品使用后请勿用手触摸铝合金萃取室及艾灸盒，以免烫伤，需待机器冷却后，再取出艾灸盒，清理使用后的艾绒和湿蒸药包；
- ◆ 本机不适合伤残人士、知觉障碍人士、智力障碍人士或儿童自行操作；
- ◆ 禁止儿童攀爬及玩耍，以免机器夹手或跌倒致使受伤；
- ◆ 移动时，请务必停止运行，并拔出电源插头。

通电前检查

- ◆ 必须使用符合本机器规定的额定电压，并带接地的3脚插座；
- ◆ 如电源线、电源线插头、电源插座有损坏，请勿使用产品；
- ◆ 不要用湿手插拔电源插头，插拔时必须紧握插头而不要拉扯电源线；
- ◆ 定期清除电源插头上的灰尘；
- ◆ 如电源线损坏，必须由制造商或专业维修人员更换。

使用中

- ◆ 请勿靠近或放在热源物体上（如暖炉等可能接触到易燃气体的场所）；
- ◆ 如出现冒烟、异味等故障情况，应立即拔掉电源插头；
- ◆ 房间内有油渣、焚香时的烟、点烟时的火苗、空气中有化学气味时请勿使用；
- ◆ 请勿在充满氢气、天然气等易燃气体的环境下使用本机；
- ◆ 使用喷雾杀虫剂时，请勿使用本机；
- ◆ 请勿在易倾倒等不稳定场所、浴室等高温、潮湿、会沾水的场所使用，以免发生触电、火灾或造成其损害；
- ◆ 按说明书的使用方法正常使用，不可以加热其他液体、固体后者其他厂家的耗材；
- ◆ 机器使用插上电源时，请勿离开；若停止使用请关掉电源。

使用后清洁


- ◆ 关掉电源，约20分钟左右加热仓（萃取室）冷却后，再拿出艾灸盒进行清洁；
- ◆ 用毛巾把萃取室清洁干净，擦干残留水渍。请勿直接翻起机器倒出萃取室内的残留盛水；
- ◆ 透明灯罩上残留的污垢用毛巾擦干净，请勿直接用水龙头清洗。

禁用人群

- ◆ 重症心血管疾病、严重心脏病患者、甲亢、恶性肿瘤、做过植入性手术者，有过内出血者、装有心脏起搏器者禁用；
- ◆ 严重高血压患者和糖尿病患者慎用；
- ◆ 严重贫血病患者禁止使用；
- ◆ 孕妇和儿童禁用；
- ◆ 对热不敏感者、皮肤异常、过敏者禁用。

装箱清单及技术参数


装箱清单：

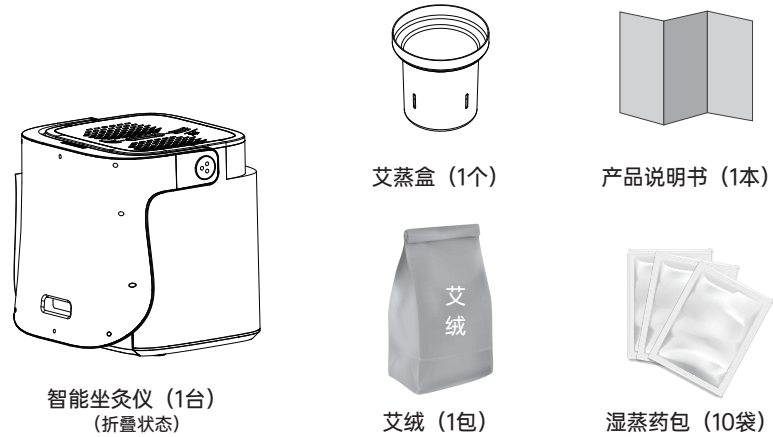

主要技术参数：

产品名称	智能坐灸仪	产品型号	AJ280-A01
额定电压/频率	220V/50Hz	额定功率	280W
整机尺寸(折叠)	440x443x445mm	整机尺寸(展开)	440x410x780mm
毛重	9.0 KG	净重	7.0 KG
执行标准	GB4706.1-2005		

产品部件介绍

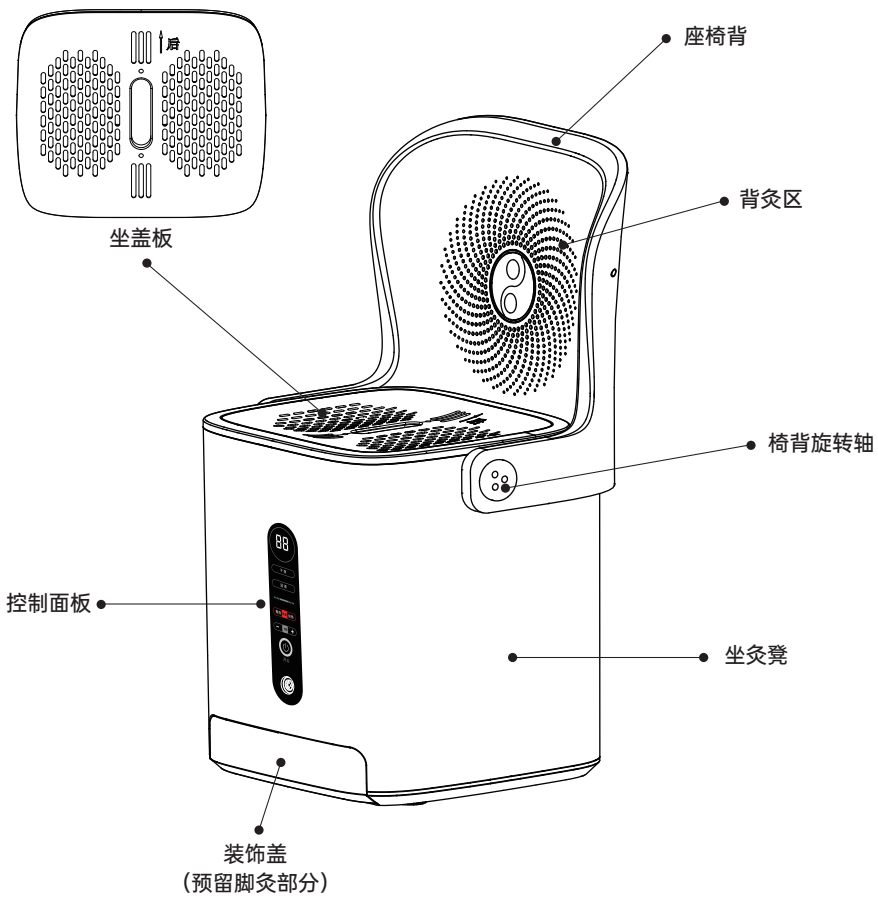

操作说明

控制面板操作说明：



⏻ 开关键

将机器通电，按“开关”键即可开/关机。

☀️ 干蒸键

循环触摸干蒸键，干蒸档位按→1档→2档→3档→4档循环切换，进入干蒸模式，无操作3S后，数码管显示时间倒计时。

💧 湿蒸键

循环触摸湿蒸键，湿蒸档位按→1档→2档→3档→4档循环切换，进入湿蒸模式，无操作3S后，数码管显示时间倒计时。

🪑 背靠键/坐垫键

- a. 按“背靠”键即可开/关背靠红光功能。
- b. 按“坐垫”键即可开/关坐垫红光功能。


⏱️ 时间“-”键/时间“+”键

- a. 设置工作时间，轻触一次则时间减少5分钟，设置时间范围为60→05分钟，3S后无操作则此按键灯熄灭。
- b. 设置工作时间，轻触一次则时间增加5分钟，设置时间范围为05→60分钟，3S后无操作则此按键灯熄灭。


智能模式：机器有关机记忆功能，记忆最后一次的功能设定。

操作说明

第一步：用前将机器放置于水平地面，向上旋转翻开椅背，打开坐盖板，放入艾绒或药包。

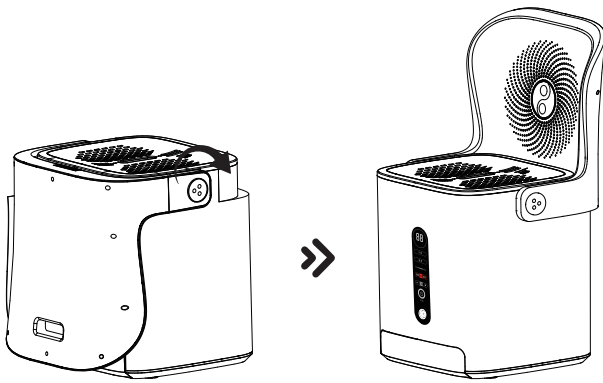


第二步：插上电源，开关按键指示灯亮红色，进入待机状态。

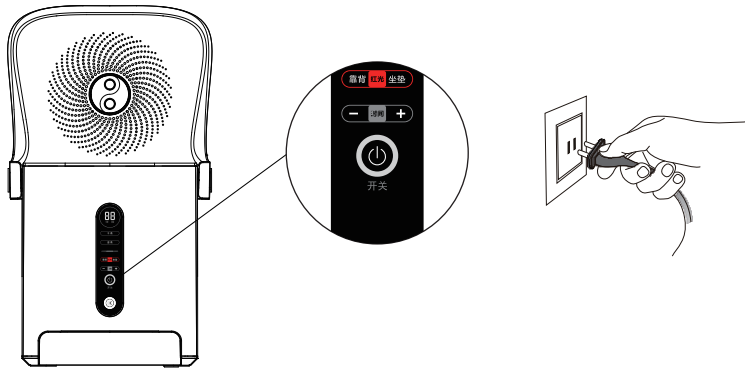

操作说明

第三步：按开关键开机，此时可以进行干蒸档位、湿蒸档位、坐垫红光、靠背红光以及工作时间的选择。

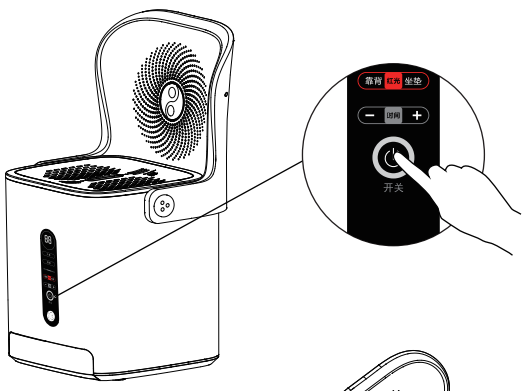

第四步：干蒸时将适量艾绒放入艾灸盒内，再调节干蒸档位设置坐感温度；干蒸档位因具体环境和穿着而不同，以温度舒适为原则。

第五步：湿蒸时将一个湿蒸药包打湿后放入艾灸盒内，并将150毫升的水放入萃取室内，再调节湿蒸档位设置坐感温度，湿蒸档位因具体环境和穿着而不同，以温度舒适为原则。



*使用时间：建议每天使用一次，每次60分钟

售后服务

尊敬的用户：

感谢您使用产品，我们将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和国家技术监督局的有关规定，凭此说明书及有效购机发票为您提供下列服务：

- ◆ 本产品是经过严格的质量管理及检验过程的产品。
- ◆ 请将说明书妥善保管，作为您享受保修服务的凭证。
- ◆ 如果您需要详细信息或有任何问题，请浏览我们的网站，也可以与本公司服务中心联系，或与当地的经销商联系。
- ◆ 如果使用过程中机器出现故障无法排除时，请按以下方式联系维修。

保修期内：请与我公司售后服务中心或特约维修点联系维修，持说明书及有效购机发票送修机器。
超过保修期：请与我公司售后服务中心或特约维修点联系维修，按照规定收费。

保修年限：

- 1、整机保修一年(自购买之日起，以发票日期为准)。
- 2、下列情况，不属于免费服务范围：
 - A、不能出示说明书及发票；
 - B、发票涂改；
 - C、意外因素或使用不当造成损坏；
 - D、未经我公司许可，自行修理造成的损坏；
 - E、超过三包有效期，经修复仍可继续使用；
- 3、公共场所使用的公用机整机保修三个月，主要零部件保修六个月。



注意：请勿自行拆机维修，应由专业人士或维修中心维修，否则易发生危险！

保修卡

产品名称：_____

产品型号：_____

产品颜色：_____

用户名称：_____

联系人：_____

联系电话：_____

客户地址：_____

购买地点：_____

购买日期：_____

以上内容请您填写完整，以便我们对您进行优质的服务。